

GAMME
AERYS

Un lit intelligent
pour l'hôtellerie
de santé

WIN  CARE



GAMME AERYS





Les lits médicalisés WINNCARE FRANCE, entièrement **conçus et fabriqués en France**, profitent d'un savoir-faire de plus de 40 ans.

Chaque année plus de **35 000** lits sortent de notre site de production Vendéen.



02 Une GAMME sur mesure

04 Focus sur l'AERYS Confort (100 cm)

06 Conçu pour le Confort et la Sécurité du résident

07 Conçu pour les soignants

08 Personnalisez votre lit

10 Sécurité et autonomie

12 Les Accessoires

14 Descriptif technique

16 Nuanciers et panneaux



La conception de la gamme a été réalisée de manière à satisfaire trois utilisateurs :

- Le **Résident**, pour sa sécurité, son confort et son bien-être
- Le **Soignant**, l'aidant, pour le protéger (Troubles Musculo Squelettiques) et optimiser sa période de travail.
- Le **Technicien** afin qu'il puisse maintenir en bon état de fonctionnement le lit.

Parce que la préservation de l'autonomie est notre crédo, nous avons créé trois lits de différentes largeurs, avec les mêmes fonctionnalités afin de répondre à toutes les demandes.

Nous avons attaché une importance particulière au design de nos lits, malgré des apparences de lits «hôteliers», ils bénéficient de toutes les fonctionnalités requises d'un lit dit «médicalisé».





UNE GAMME SUR MESURE



90 cm

AERY'S[®]
STANDARD

Pour une utilisation
standard



100 cm

AERY'S[®]
CONFORT

Améliorer le confort et
la sécurité
du résident



120 cm

AERY'S[®]
XXL

Pour accueillir
les résidents
jusqu'à 270 kg





AERYS
CONFORT 100

TÉMOIGNAGE D'UNE DIRECTRICE D'EHPAD, QUI A ÉQUIPÉ EN 2018 SON ÉTABLISSEMENT (78 LITS) EN LIT AERYS CONFORT.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'un lit avec une largeur de sommier de 100 cm ?

Notre établissement accueille des personnes de plus en plus âgées. Nous souhaitons leur garantir le plus longtemps possible leur autonomie. Lorsque l'on vient de son domicile ou l'on a été habitué à dormir dans de «grands» lits, passer sur un lit de 90 cm de large pose un vrai problème au résident, la peur de tomber est alors très fréquente. Le lit **AERYS Confort** est une alternative probante à cette problématique.

Pourquoi est-ce une alternative intéressante ?

Les principales raisons sont le confort et la sécurité du résident : avec un lit plus large de 10 cm, il n'est plus nécessaire de positionner des barrières. J'ajouterais même qu'en plaçant vos Systèmes d'Aide à la Mobilité, nous contribuons à préserver l'autonomie de nos résidents et ainsi décharger nos personnels soignants d'un certain nombre de tâches liées aux transferts.

Au-delà de la largeur de l'AERYS Confort, quels autres intérêts avez-vous trouvé au lit ?


Pour moi c'est un tout, le lit a permis de pérenniser l'autonomie de nos résidents notamment grâce à la mémorisation d'une hauteur qui sécurise les entrées et sorties de lit. L'espace libre sous le lit permet un accès plus facile et un gain de temps dans les opérations de ménage. Enfin la position fauteuil accessible par une seule commande est appréciée des résidents et des soignants. Le principal pour moi est que le lit **AERYS Confort** donne satisfaction aux résidents et aux soignants.





LA FONCTION DU LIT MÉDICALISÉ EN EHPAD A CONSIDÉRABLEMENT ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES


De simple couchage, il est devenu un outil au service du bien-être des résidents, et aussi des soignants et des aidants en contribuant à la prévention des **Troubles Musculo Squelettiques (TMS)**.

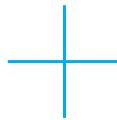

UNE GAMME DE LITS POUR TOUS TYPES DE PATIENTS

L'âge moyen d'entrée en EHPAD est de plus en plus élevé (**85 ans et 9 mois en France***) ceci s'accompagne d'un niveau de dépendance important. De la même façon les EHPAD doivent offrir la possibilité d'accueillir les personnes handicapées vieillissantes. On retrouve également dans nos EHPAD des personnes obèses.

* CNSA. Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2018.

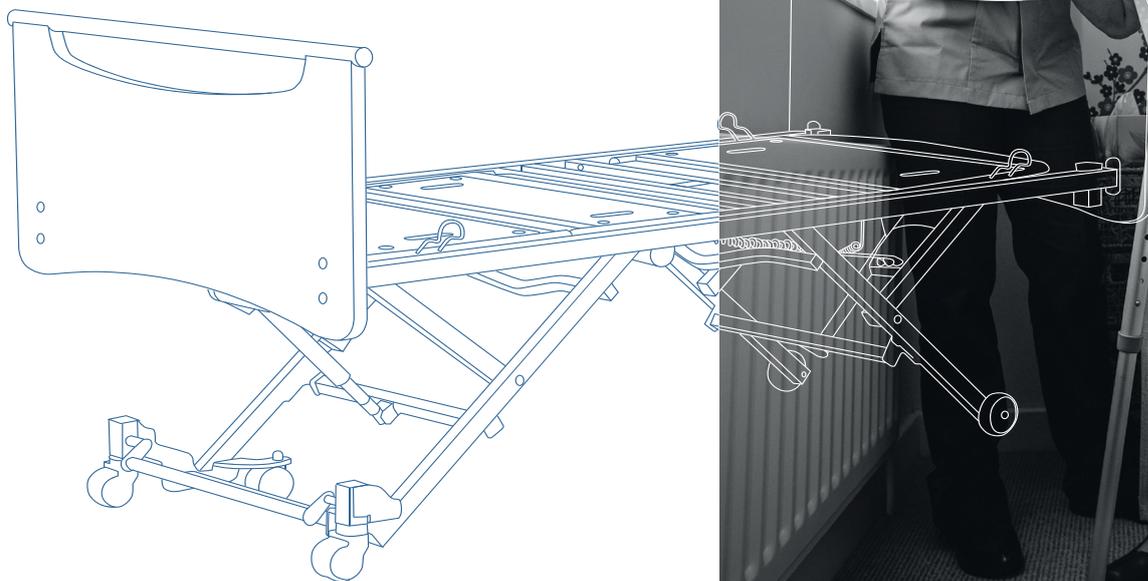



LIT CONÇU POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DU RÉSIDENT



Position fauteuil

Elle est accessible au résident grâce à une seule touche. Elle lui apporte du CONFORT et améliore son état général en réduisant le retentissement physiologique consécutif à son alitement et à la réduction de sa mobilité.



Mémorisation de la hauteur variable

Grâce à la possibilité de personnaliser une hauteur de lit, vous pourrez sécuriser les entrées et sorties de lit. De cette façon vous préserverez l'autonomie de vos résidents.



Horizontalité permanente et automatique

Grâce à son boîtier de contrôle NUMÉRIQUE (Boîtier CO61 de chez LINAK) la gestion de l'horizontalité est totalement automatique (pas besoin de revenir au plus bas ou au plus haut).




LIT CONÇU POUR LES SOIGNANTS

Les contraintes liées à l'exercice de la profession de soignant sont importantes, notamment avec un âge d'entrée en EHPAD de plus en plus retardé pour les résidents. Ceci implique des niveaux de dépendance plus élevés à leur arrivée en établissement.

Par conséquent le travail quotidien des équipes soignantes ne se limite plus uniquement aux soins.

Le lit doit permettre d'accompagner le soignant lors des transferts, mais aussi simplifier et faciliter les accès sous le lit.

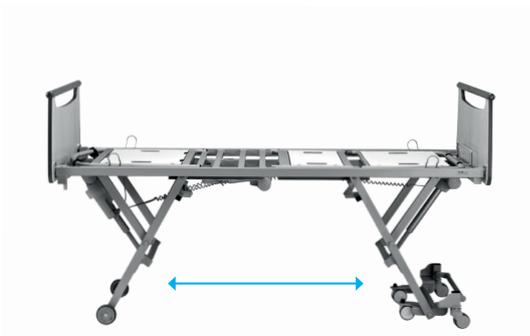

La conception du châssis du lit permet un dégagement important pour le nettoyage et désinfection des sols et surfaces du lit améliorant ainsi **L'ERGONOMIE** au travail et permettant des gains de productivité.



L'arrêt à -5° contribue à aider le **RÉHAUSSEMENT** du résident qui peut-être effectué par le soignant.

PERSONNALISEZ VOTRE LIT



Les roues masquées



Elles permettent de masquer les roues qui peuvent donner un aspect médicalisé au lit tout en conservant ses fonctionnalités (freinage centralisé, déplacement latéral).



Habillage Hôtelier

L'Habillage Hôtelier avec ses longs pans plus larges vient masquer avec harmonie les barrières métalliques installées sur le lit médicalisé.



Long pans Universels

Le kit* «longs pans universels» permet de masquer les parties métalliques du sommier du lit.

Il est également compatible avec tous les panneaux de lits.

* Disponible par paire
(1 côté droit et 1 côté gauche)



SÉCURITÉ ET AUTONOMIE



Barrières 3/4 en métal/époxy 3 barreaux

Équipées de système de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences de la norme 60 601-2-52 en matière d'espacement.



Barrières pleines longueur en bois

DISPONIBLES EN 2 FINITIONS :

- ▶ Enrobage polymère coloris hêtre clair.
- ▶ Peinture vernie suivant les coloris du nuancier.



½ Barrières aluminium/bois

Elles sont munies d'un système de verrouillage, déverrouillage breveté garantissant une sécurité pour les patients.

3 HAUTEURS = 3 UTILISATIONS

- position haute = contention
- position intermédiaire = aide au retournement/redressement
- position basse = sortie et entrée dans le lit



Système d'Aide à la Mobilité (SAM)

Il s'agit d'accessoires de lit offrant de nouvelles fonctionnalités pour favoriser la mobilité des personnes soignées tout en réduisant et facilitant les interventions des soignants ou des aidants.

SAM ACTIV ou SAM ERGONOM selon le besoin.

Co-propriété intellectuelle

WinnCare France - CHU de Nîmes
N°EP2617403
N°EP2617404



LES ACCESSOIRES

Panneau Sonore

Améliorez le cadre de vie des résidents et des soignants de votre établissement en limitant les nuisances sonores liées à l'écoute de la télévision notamment.

Restitué de façon homogène et immersive au travers de la tête de lit, le son peut être réduit d'au moins 20 décibels, tout en garantissant une excellente qualité d'écoute.



Barrières pied de lit

Elles permettent de combler l'espace en pied de lit afin d'avoir un moyen de contention sur l'intégralité de la longueur du lit.





Liseuse

Lampe LED sur bras flexible permettant la lecture au lit (à positionner dans l'emplacement tige porte-sérum).



Veilleuse de nuit

Cette veilleuse actionnable par le bouton relève-buste, par simple appui permet d'avoir une source lumineuse sous le lit.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | | AERYS® STANDARD | AERYS® CONFORT | AERYS® XXL |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| DESCRIPTIF TECHNIQUE | Longueur | 200 cm | | |
| | Largeur | 90 cm | 100 cm | 120 cm |
| | Poids maxi patient | 165 kg | 165 kg | 270 kg |
| | CFS | 200 kg | 270 kg | 305 kg |
| | Amplitude de hauteur | 25 à 80 cm | 25 à 80 cm | 25 à 72 cm |
| | Proclive/déclive | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mémorisation hauteur variable | de série | | |
| | Horizontalité permanente | de série | | |

OPTIONS & ACCESSOIRES

| | | AERYS® STANDARD | AERYS® CONFORT | AERYS® XXL |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| OPTIONS | Freinage centralisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Chariot multidirectionnel | ✓ | ✓ | |
| | Roue cachées | ✓ | ✓ | |
| | Coloris châssis hors standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACCES- SOIRES | 1/2 barrières alu | | ✓ | |
| | Barrières bois | | ✓ | |
| | Barrière pied de lit | | ✓ | |
| | Rallonge de lit intégrée | ✓ | | |

COMPATIBILITÉ GAMME PRÉVENTION ET AIDE AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE

Vous trouverez dans notre gamme des matelas en mousse ou à air dynamique, compatibles avec nos trois lits.



CONFIGURATEUR

Grâce à notre outil de configuration des lits et de l'environnement de la chambre, vous pouvez grâce à ce moyen interactif vous projeter de manière vraisemblante dans votre projet.

N'hésitez pas à nous contacter pour tenter l'expérience.



NUANCIER

DÉCORS MÉLAMINÉS ET CHANTS ASSORTIS

Pour les panneaux de lit et mobilier



Erable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)



Albany (1)



Dragonnier Gris (1)




Chêne Milano Foncé (1)




Craie



Magnolia*

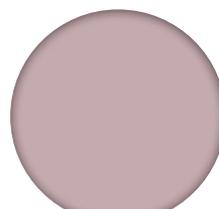


Rose

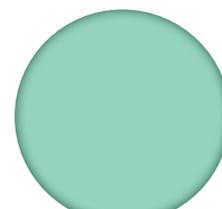

Cadiz




Hudson*

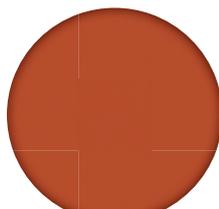


Rouge Siena

COULEURS DU CHÂSSIS

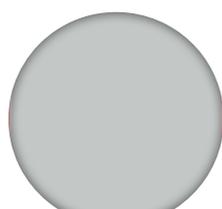


RAL 7035

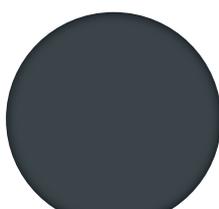

RAL 7016



RAL 7030

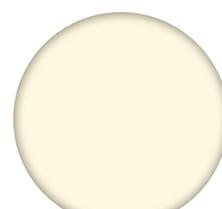

RAL 7013

(1) Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLIVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm.

* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact

Photos non contractuelles

PANNEAUX

madelia



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé ral 7030

abélia *



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés, ral 7030
- ▶ Main courante époxy ral 7030

carmen



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 7030



stylvia *



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 7030



val de vie



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage ral 7030

auzence



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage ral 7030

novida *



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants assortis
- ▶ Forme des panneaux tête et pied identique
- ▶ Dimensions panneaux tête et pied différentes



* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium.
Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

NOS LITS

sont conçus et fabriqués depuis plus de 40 ans

 Vendée (85)

NOS MATELAS

sont conçus et fabriqués depuis plus de 30 ans

 Gard (30)



Votre satisfaction est notre seul but

Aménageons ensemble vos espaces de vie !
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes au plus proche de vos besoins et de vos goûts.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet et du cycle de vie des produits.

Vous avez un projet, contactez-nous :

+33 (0)4 66 02 15 15



[winncare.fr](https://www.winncare.fr)

