

À commander sur le site (30) Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



axlar
XXL®

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE ÉLEVÉ**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, en zone d'appui.

100 ≤ 270kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D




COMPATIBLE
PROGRAMME
AirCare®

automatic
—technology—
BREVET

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ 2 modes thérapeutiques : Dynamique, Statique basse pression
- ▶ Mode soins
- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- ▶ 2 largeurs disponibles : 120 cm et 140 cm
- ▶ Alarmes : visuelles et sonores
- ▶ QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- ▶ Livré prêt à l'emploi

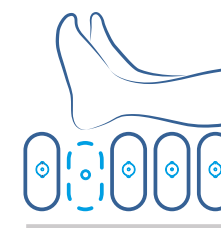

DÉCHARGES TALONNIÈRES INTÉGRÉES
(5 dernières cellules)

HOUSSE	LARGEUR DE LIT (CM)	CARTON INDIVIDUEL
	120	VAXT/XXL-120
	140	VAXT/XXL-140

LES + PRODUIT

- Pour les patients jusqu'à 270 kg, disponible en 2 largeurs 120 cm ou 140 cm
- Bordures stabilisatrices en mousse ferme pour faciliter la sortie de lit et assurer un bon positionnement pendant le coucher
- Décharges talonnières accessibles par l'extérieur
- Housse bleue PUHD



CELLULES

- ▶ 21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm
- ▶ 4 zones thérapeutiques :
 - 2 cellules de tête statiques
 - 4 cellules cervico-dorsales
 - 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
 - 5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles par l'extérieur



VANNE CPR LATÉRALE (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque.



BORDURES STABILISATRICES

- ▶ Pour faciliter les transferts